

モアクリーン 歯ブラシ

一見、

ふつふつの歯ブラシ。

実は、ヒミツが、あるんです。



モアクリーンコンパクト



モアクリーンスリム



ハミガキが楽しいなんて
思っていなかった!

歯ブラシはどれもいっしょ
だと思っていた。
けど、違っていた!




この歯ブラシで
あなたのデンタルライフを変えましょう。

Secrets

モアクリーンの毛先のヒミツを大解説!

モアクリーンの毛先図

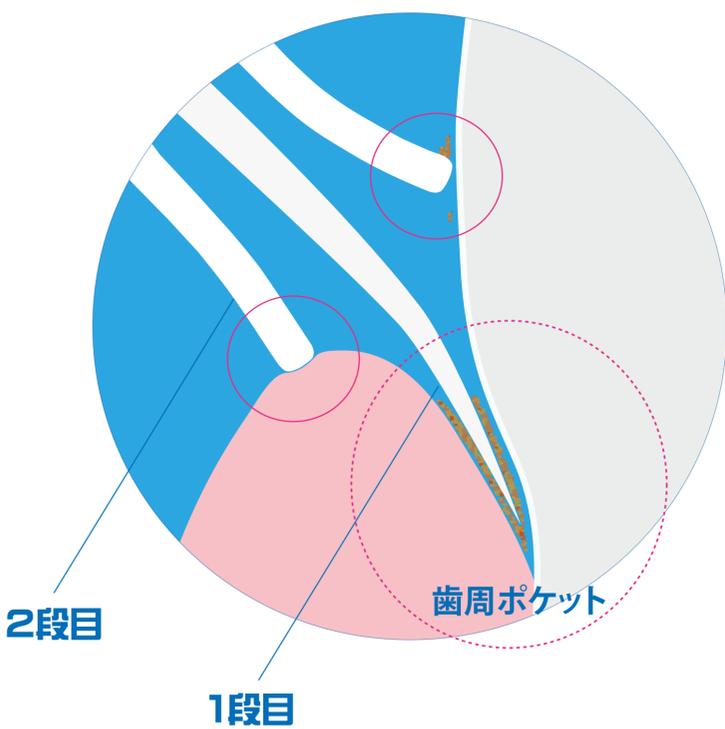

ヒミツ1 2段になった毛先にヒミツが!

1 段階目 先端を細く加工された長毛のはたらき
歯周ポケット (歯と歯ぐきのすき間) の奥まで届き、
確実なプラーク除去が可能です



各歯の歯周ポケットに沿って
綺麗に毛が入り込んでいます

ヒミツ2

2 段階目 フラットに加工された短毛：3つのはたらき

はたらき1.
歯面の汚れをしっかりと拭い取ります

はたらき2.
長毛が歯周ポケットの奥まで入り込み過ぎないようにコントロールの役目を果たします

はたらき3.
歯肉のマッサージをします
歯肉の血行を良くすることで、歯周病予防につながります

ヒミツ3 毛先の素材にもヒミツが!



長く使えて衛生的

耐久性に大変優れており(腰がある)、
かつ乾燥が早い素材を使用していますので、長くご使用頂けます

How to Use

モアクリーン歯ブラシを使ったブラッシングのポイント解説!

歯と歯ぐきの間に毛先を当てて

point!

クルクルと小さな円をえがくように

クルクル

クルクル

point!

小刻みに

動かすと

point!

自然に

歯周ポケットへ毛が入り込んで

スウッキリ!

*最大限の効果と気持ちよさを感じて頂くために、歯科医院でブラッシング指導を受けることをお勧めします。